

PHILIPS

sonicare



ソニックケア ダイヤモンドクリーン スマート

DiamondClean Smart

ソニックケアアプリと連動し、最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド

ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラシヘッド認識機能

4つのモード、3段階の強さ設定



HX9911/66

高い菌垢除去力^{*1}と多彩な機能・アクセサリーを求める方へ

より優れたブラッシング体験^{*2}を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、より優れたオーラルケア^{*2}を実現する高性能^{*2}電動歯ブラシです。／製品イメージ（上記製品写真）について：アプリの内容は予告なく変更することがあります。スマートフォンは含まれません。^{*1}手磨きと比べ/フィリップス調べ。^{*2}弊社製品ラインナップでの比較

お口の健康を推進

- プレミアムオールインワンブラシヘッド

ソニックケアアプリと連動し、最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド


- 磨き方をサポート
- 仕上げ磨き機能
- 問題がある箇所に注目、目標を設定
- 過圧防止センサー機能
- ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

ブラッシングを最適化

- ブラシヘッド認識機能
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- 4つのモード、3段階の強さ設定


特長

過圧防止センサー機能

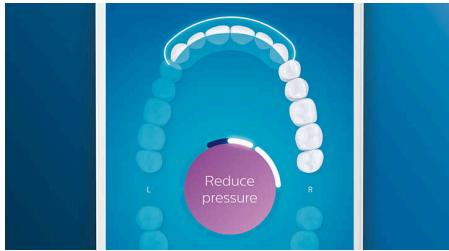

歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

ブラシヘッド認識機能

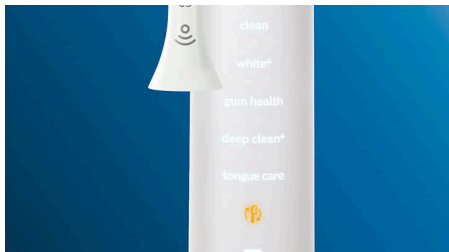

ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）


4つのモード、3段階の強さ設定



4つのブラッシングモードを搭載。クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイートプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢


を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかりと除去）の4つのモードが、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

磨き方をサポート

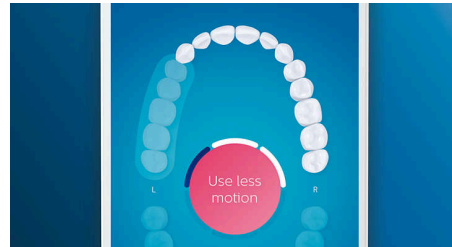

位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。


プレミアムオールインワンブラシヘッド

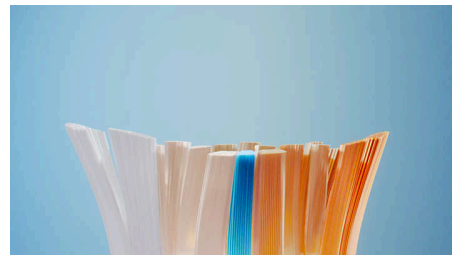

プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます*3。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去できます*4。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境目を洗浄し、2週間で歯ぐきの健康を推進します*5。ブラシヘッドの効果は3ヶ月ほどで低下していきませんが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把

握して交換時期のタイミングを教えてください*3。手磨きと比べ/フィリップス調べ。 *4プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ/実際の口内では異なる場合があります *5クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ。 /画像はイメージです


問題がある箇所に注目、目標を設定

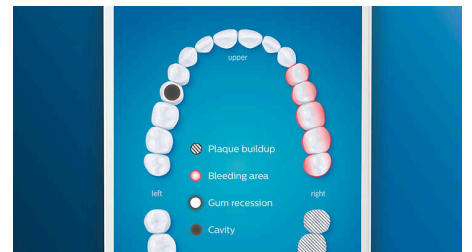

アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。


特長

仕上げ磨き機能

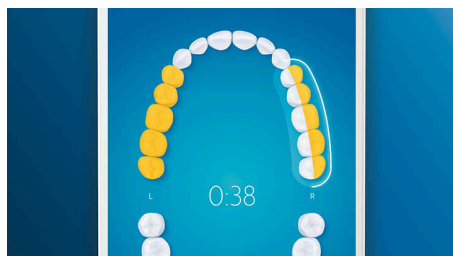


磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

ハンドルの動かかしすぎを検知してお知らせ

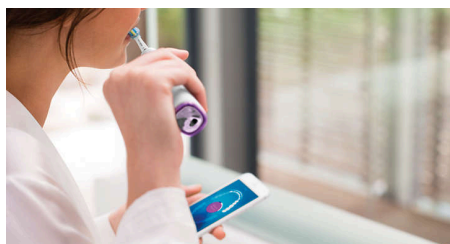

ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かかしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

ブラシヘッド交換お知らせ機能

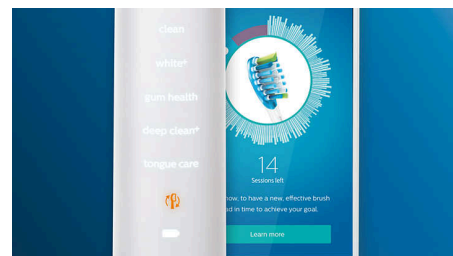

ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。

仕様

コネクティビティ

Bluetooth®*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 14 日間*****

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0以降搭載機種) *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。、Bluetooth 4.0以降搭載機種

iOS***: iPad 第三世代以降, iPhone 4S 以降, iOS 7.0 以降

使いやすさ

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

充電表示ランプ: ランプでバッテリー残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

ブラシヘッド自動認識: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合

交換お知らせ機能: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンが点灯します

内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 9000 1 本

ブラシヘッド: プレミアムオールインワン 1 本

充電器用グラス: 1

充電器: 1

洗浄性能

性能: 歯垢を除去

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

過圧防止センサー機能: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルの振動が変化してお知らせ
仕上げ磨き: ○

モード

クリーン: 歯をキレイに

3段階の強さ設定: 強, 弱, 中

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

舌磨き: きれいな息が長続き

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択

プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択

プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善

摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導

3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト

仕上げ磨き: 磨き残しに対処

