

PHILIPS



Draagbare medicatievernevelaar
met compressor

InnoSpire Mini

Ontworpen voor onderbroken
gebruik

Behandeling in 6-8 minuten*

Oplaadbare batterij

Inclusief SideStream Plus



HH1302

Een ideale reisgenoot

Compact en lichtgewicht

Dankzij de InnoSpire Mini, een draagbare vernevelaar, kunt u uw medicijnen vernevelen waar en wanneer u maar wilt. InnoSpire Mini is met zijn compacte afmetingen de ideale reisgenoot en biedt u de onafhankelijkheid om alles uit het leven te halen.

Draagbaar

- Consistente therapie waar u op kunt rekenen
- Compact en lichtgewicht

Meerdere voedingsopties

- Inclusief oplaadbare batterij

Beproefde vernevelingstechnologie

- Inclusief duurzame SideStream Plus-vernevelaar
- Behandeling toegediend in 6-8 minuten*
- Compatibel met de vaakst voorgeschreven vernevelingsmedicijnen

Kenmerken

Veelzijdigheid



In staat om een grote verscheidenheid aan medicijnen te vernevelen die regelmatig in combinatie met vernevelaars worden gebruikt om ademhalingsaandoeningen te behandelen.

Onderbroken gebruik



Ontworpen voor onderbroken gebruik (30 minuten aan/30 minuten uit) en geschikt voor thuis en onderweg. Philips InnoSpire Mini biedt consistente medicijntoediening voor hoogwaardige aerosolbehandeling waar u op kunt vertrouwen.

Meerdere voedingsopties



De InnoSpire Mini kan worden aangesloten op een klassiek stopcontact of kan worden gevoed door de lithiumionbatterij, die de compressor tussen opladen door 90 minuten ingeschakeld kan houden. De InnoSpire Mini kan ook worden gevoed door een 12V-gelijkstroomautoadapter wanneer u onderweg bent.

Draagbaar




Het InnoSpire Mini-compressorsysteem voor verneveling stelt patiënten effectief in staat de meeste gebruikelijke aerosolmedicatie te vernevelen. Het systeem is draagbaar, waardoor u uw behandeling vrijwel overal en altijd kunt uitvoeren wanneer het u uitkomt.

Beproefde vernevelingstechnologie



SideStream Plus is ontworpen om meer lucht aan te zuigen via een actief venturisysteem, wat resulteert in snelle medicijntoediening en korte behandelingstijden. Het unieke diamantvormige straalontwerp helpt slijtage door frequent gebruik beperken en ondersteunt consistente toediening van een hoogwaardige aerosol.

Behandelingstijd

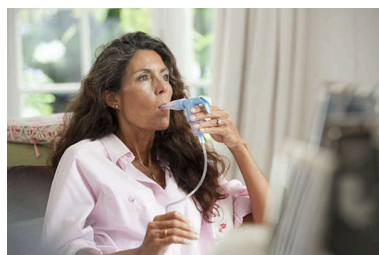

InnoSpire Mini is ontworpen om in combinatie met de SideStream-vernevelaar te zorgen voor korte behandelingstijden en een snelle toediening van medicijnen.

Specificaties

Inhoud verpakking

Inclusief: User Manual, InnoSpire Mini compressor

Parameters tijdens gebruik

Maximum flow rate: 8 LPM

Maximum pressure: 30 psi

Mode of operation: Intermittent (30 min. on/off)

Prestatiegegevens

MMAD: 4.77 μ m

Fine particle fraction: 51.44% below 5 μ m

Battery charging time: Approximately 6 hours

No. of treatments per charge: Up to 12 treatments*

Operating time with battery: Up to 90 minutes

Vervanging

SideStream Plus: Every 6 months

Productgegevens

Garantie: Battery: 6 months, Compressor: 3 years

Noise level: 58 $\pm$ 4 dBA

