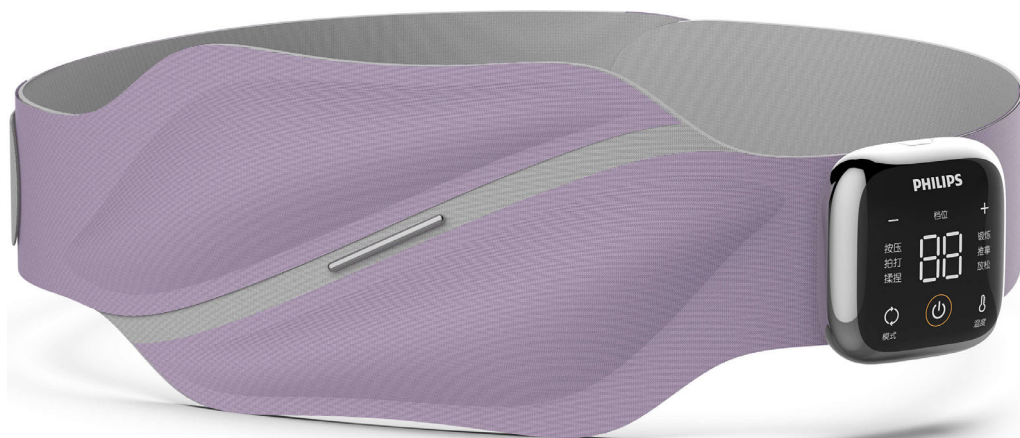




Philips
腰部按摩器

EMS 技术按摩

穿戴轻便、隐形
无线使用

PPM3301BPP

穿戴轻便，隐形呵护

智能控制，无线 EMS 按摩

按摩器采用莱卡面料，轻盈舒适。按摩器具有 EMS 脉冲按摩和热敷功能，能有效放松深层肌肉，缓解不适。控制器可拆卸，体积小，便于携带。

EMS 脉冲按摩，缓解不适

- EMS 脉冲可放松肌肉群，缓解酸痛
- 3 档热敷温度，缓解疼痛
- 30 分钟智能定时按摩，避免过度按摩

轻薄、亲肤、使用舒适

- 轻薄、轻柔、佩戴舒适

可拆卸便携控制器

- 大型触摸屏，智能语音提示功能。
- 可插拔、拆卸，易于安装、充电和存储
- 内置电池，便于无线使用

PHILIPS

腰部按摩器

EMS 技术按摩 穿戴轻便、隐形, 无线使用

规格

普通参数

- 净重: 168 克
- 颜色: 紫色
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 1000 × 118 × 23 mm

主要参数

- 加热温度: 40-50 °C
- 工作电压: 3.7 V
- 工作功率: 5.5 瓦

- 电池: 2500 毫安时
- 充电电流: 1 A
- 充电端口: Type-C
- 充电电压: 5 V

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

PPM3301BPP/93

产品亮点

EMS 脉冲按摩

预设 6 种按摩模式和 12 档按摩强度。多档结合, 可避免损伤并有效消除疲劳。

智能大屏幕控制

智能大屏幕, 数字显示和内置语音提示。使用 EMS 技术享受放松按摩。

可拆卸控制器

控制器可插拔、拆卸, 易于安装、充电和存储。可拆卸设计, 更便于旅行和携带, 且易于清洗。

无线使用

容量为 2500 毫安时的内置电池可使设备在充满电后高速运转 3 小时。

热敷功能

NTC 可将温度智能控制在 40 至 50 度之间。热敷功能可促进血液循环, 有效缓解肌肉紧张并减少局部疼痛。按摩器可以让您缓解一天的疲劳, 充分放松。

定时关闭

定时 30 分钟运行时间后可自动关闭, 有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

轻薄、亲肤材质

主体是由莱卡织物经热压而成。整机肌肤触感柔软, 非常轻薄, 佩戴时隐形不露痕, 更便于出门。



发行日期 2025-06-26

版本: 2.2.1

EAN: 69 74650 09164 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com