

PHILIPS

sonicare



Sonický elektrický
zubní kartáček

ProtectiveClean 4300

Zabudovaný tlakový senzor

1 režim čištění

1 x funkce BrushSync



HX6807/04

Čistější zuby. Šetrné čištění.

Odstraňuje až 7x více zubního plaku než manuální kartáček

Díky našemu tlakovému senzoru poznáte rozdíl šetrného čištění a zároveň se zbavíte až 7x více plaku, než při používání manuálního kartáčku.

Proven to improve oral health

- Odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček
- Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Designed around you

- Program Easy start vám pomůže vybudovat správné návyky čištění sonickým kartáčkem Philips Sonicare
- Motivace k důkladnému čištění
- Vždy víte, kdy vyměnit hlavici kartáčku

Innovative technology

- Upozorní vás, pokud při čištění příliš tlačíte
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi

Přednosti

Rozlučte se s plakem



Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna odstraní až 7x více plaku než manuální zubní kartáček a díky speciálně zaoblené špičce snadno dosáhnete na zuby v zadní části ústní dutiny.

Bezpečný a šetrný



Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Jediná opravdová sonická technologie



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Sleduje tlak čištění



Přílišný tlak při čištění může poškodit vaše zuby a dásně. Aby tomu zabránil, vydává zubní kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean jemný pulzující zvuk, kterým vás upozorní, abyste netlačili.

Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.


Připomínka výměny pomocí technologie BrushSync



Všechny hlavice kartáčku se časem opotřebují. Ale naše technologie BrushSync sleduje, jak dlouho jste hlavici používali a jak silně jste na

kartáček tlačili. Když je čas hlavici vyměnit, upozorní vás krátké pípnutí a světelná kontrolka na těle kartáčku. Díky tomu si můžete být jisti, že hlavice odvádí dobrou práci.

Zjednodušte své návyky

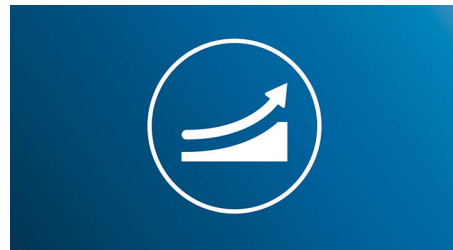

Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Náš program Easy start vám poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

Užitečné časovače



Hledáte elektrický kartáček s časovačem? Zatímco náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili tu správnou dobu čištěním každé jednotlivé části úst, časovač Smartimer vás zase upozorní, že jste si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

ProtectiveClean 4300

Sonický elektrický zubní kartáček

HX6807/04

Specifikace

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Bílá a mátová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Balení obsahuje

Nabíječka: 1

Kartáčkové hlavice: 1 C2 Optimal Plaque Defence

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Výkon: Odstraňuje až 7x více plaku*

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

2 nastavení intenzity: Nízká, Vysoká

Technologie Smart Sensor

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

