

PHILIPS



Infraroodlamp

300W

Voor een diepe zonebehandeling

Instelbare hoek



PR3120/00

Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen

Klinisch bewezen technologie*

Verlicht uw spier- en gewrichtspijn zonder medicijnen. Onze klinisch bewezen technologie verhoogt plaatselijk de bloedcirculatie om uw spieren te helpen herstellen en uw spier- en gewrichtspijn te verminderen.

Bewezen gezondheidsvoordelen

- Klinisch bewezen
- Geclassificeerd medisch apparaat

Zonebehandeling

- Lokale verlichting van pijn

Effectieve* verlichting van pijn

- Pijnverlichting en verbeterde mobiliteit
- Helpt het lichaam op een natuurlijke manier genezen

Kenmerken

Effectieve* verlichting van pijn



Onze klinisch bewezen technologie biedt verlichting van spier- en gewrichtspijn zonder gebruik van medicijnen. De InfraCare PR3120 stimuleert de lokale bloedsomloop en verhoogt de lokale toevoer van zuurstof voor een effectieve zonebehandeling. Deze inturn biedt een ontspannende invloed op het getroffen gebied en helpt bij het effectieve* herstel van pijn.

Diepe infraroodbehandeling



InfraCare is ontworpen om de krachtigste infraroodgolven de diepste lagen van de huid binnen te laten dringen. Infraroodwarmte versnelt de lokale bloedsomloop, waardoor metabolische eindproducten en kooldioxide sneller uit het spierweefsel worden afgevoerd.

Klinisch bewezen


Betrouwbare technologie die wordt gebruikt door professionals. Het is klinisch bewezen dat deze technologie tot een meetbare verbetering van de gewrichtsfuncties leidt*. InfraCare leidt bewezen tot een aanzienlijke vermindering van pijn bij 71% van patiënten met reumatoïde artritis en bij 72% van patiënten met lage rugpijn*.

Geclassificeerd medisch apparaat



Een veilige en effectieve manier voor het behandelen van uw pijn. InfraCare voldoet aan de standaard IEC 60601-1 3e editie voor medische hulpmiddelen.

Instelbare hoek

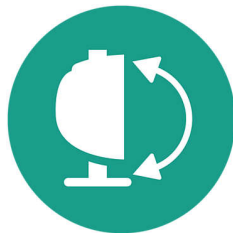

De InfraCare 300 W lamp kan gemakkelijk onder een hoek van 0 tot 40 graden worden geplaatst om pijn op een comfortabele en een effectieve* manier te verlichten.

Specificaties

Specifieke behandeling

Infrarood halogeenlamp: 300 W
Behandelingsgebied: 40 x 30 cm

Technische specificaties

Snoerlengte: 250 m
Vermogen: 300 W
Spanning: 110 V of 220-230 volt
Frequentie: 50-60 Hz
Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Lifetime of lamp: 500 uur

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 18,0 x 20,6 x 31,6 cm
Gewicht van het product: 2 kg
Afmetingen F-doos: 22,3 x 24,9 x 33,4 cm

Logistieke gegevens

Land van herkomst: Hongarije

Veiligheid

IEC certified: IEC 60601-1, 3e editie
Automatische uitschakeling na 30 minuten

Gebruiksvriendelijk

Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
1 handvat + 1 handgreep
Mechanische timer

Medische apparatuur

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):
2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

