

PHILIPS

sonicare



Szczoteczka soniczna
z aplikacją

DiamondClean 9000

Łatwe szczotkowanie z aplikacją
mobilną

Czujnik siły nacisku

Dobór programu i intensywności

4 programy, 3 poziomy
intensywności



HX9914/55

Poczuj różnicę od pierwszego użycia

Bielsze zęby już w 1 tydzień*

Najlepsza szczoteczka Philips Sonicare do kompleksowej pielęgnacji jamy ustnej.
Wybierz Philips Sonicare.

Ciesz się stylową i wygodną w użyciu rączką

- Długi czas użytkowania po naładowaniu

Zadbaj o zdrowie jamy ustnej

- Bezłitosna dla płytki nazębnej, delikatna dla dziąseł
- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej*

Szczoteczka DiamondClean 9000 dopasowuje się do Twoich potrzeb


- Mycie zębów zaprojektowane z myślą o Tobie
- Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania
- Inteligentny dobór programu czyszczenia i jego intensywności
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów

Śledź swój postęp dzięki aplikacji na telefon

- Zacznij już teraz i zadbaj o zdrowie swojej jamy ustnej


Zalety

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

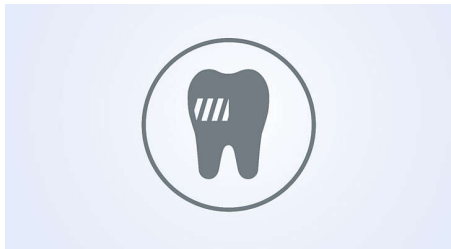

Końcówka C3 Premium Plaque Defence została zaprojektowana z myślą o najgłębszym czyszczeniu. Miękkie i elastyczne włosie końcówki dopasowuje się do kształtu zębów, czterokrotnie (4x) zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami, i skutecznie dociera do przestrzeni międzyzębowych.*

Raport postępu

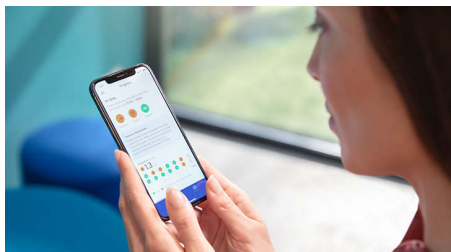

Szczoteczka DiamondClean 9000 zapewnia wskazówki dotyczące poprawy i utrzymania zdrowych nawyków mycia zębów. Inteligentne czujniki poinformują Cię, gdy będziesz naciskał zbyt mocno, a po połączeniu z aplikacją w telefonie raport postępu pomoże Ci śledzić i kontrolować rozwój w dbaniu o higienę jamy ustnej.

4 programy, 3 poziomy intensywności



Szczoteczka DiamondClean 9000 oferuje cztery programy czyszczenia (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+). Program Clean specjalizuje


się w precyzyjnym czyszczeniu na co dzień, White+ w usuwaniu przebarwień, Gum Health w skutecznym czyszczeniu bardzo delikatnym dla dziąseł, a Deep Clean+ w pobudzającym głębokim czyszczeniu. Dodatkowo, trzy poziomy intensywności (wysoki, średni, niski) pozwolą jeszcze bardziej dopasować pracę szczoteczki do potrzeb Twojej jamy ustnej.

Funkcja Brush Sync



Dzięki funkcji BrushSync, końcówka Philips Sonicare inteligentnie połączy się z Twoją szczoteczką automatycznie włączając dedykowany program czyszczenia.

Czujnik siły nacisku

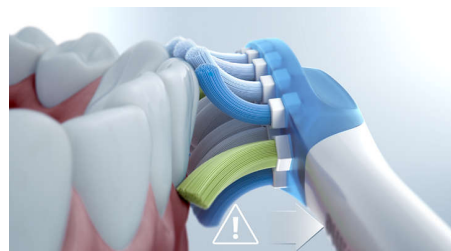

Możesz nie zauważyć, że szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale szczoteczka DiamondClean 9000 na pewno to zarejestruje. Jeśli będziesz naciskać zbyt mocno, szczoteczka od razu Cię o tym poinformuje. Dzięki temu poprawisz swoją technikę szczotkowania.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki z czasem się zużywają, więc warto zwracać uwagę na swoją. Szczoteczka DiamondClean 9000 śledzi jak długo korzystasz z końcówki i jak często jej używałeś. Ikona na dole rączki poinformuje Cię, gdy nadejdzie czas wymiany na nową.

Akumulator



Stosując regularnie, szczoteczka będzie pracować do 2 tygodni na jednym ładowaniu

C3 Premium Plaque Defense



Końcówka Premium Plaque Defence została zaprojektowana z myślą o najgłębszym czyszczeniu. Miękkie i elastyczne włosie dopasowuje się do kształtu zębów, czterokrotnie (4x) zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami, i skutecznie dociera do przestrzeni międzyzębowych.*

Dane techniczne

Aktualizacja produktu

Okres pomocy technicznej: Firma Philips zapewni niezbędne aktualizacje zabezpieczeń do 31 grudnia 2026 r.

Łączność WiFi

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone 4S lub wyższy, z systemem iOS7 lub wyższym, z systemem operacyjnym iOS7

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Rączka: 2 DiamondClean 9000

Końcówki szczoteczki: 2 C3 Premium Plaque Defense

Szklanka do ładowania: 1

Ładująca podstawka do szklanki: 2

Skuteczność czyszczenia

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

3 poziomy intensywności: Wysoki, Niski, Średni

Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Gum Health: Skuteczne czyszczenie bardzo delikatne dla dziąseł

White+: Usuwanie przebarwień

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Technologia BrushSync: Łączy inteligentną rączkę szczoteczki, i inteligentną końcówkę

Pomoc w zakresie oprogramowania

Aktualizacje oprogramowania: Firma Philips zapewnia stosowne aktualizacje oprogramowania przez okres 2 lat od daty zakupu.

