

# PHILIPS

## sonicare

ソニックア— 3100

3100 series

音波水流

過圧防止センサー機能

カドベーター機能とスマートタイマー機能

スリムなデザイン\*<sup>1</sup>



HX3671/23

## スリムで軽量\*<sup>1</sup>。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ

### 音波水流で歯垢をしっかりと除去

毎分約31,000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流（口の中の唾液の流れ）を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。 \*<sup>1</sup>既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

#### 使いやすさ重視の設計

- スリムで持ちやすいデザイン\*<sup>1</sup>
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- USB充電式

#### ブラッシングを最適化

- スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）・カドベーター機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

#### ソニックア—への移行は簡単

- イーリースタート機能

#### 歯ぐきを保護

- 過圧防止センサー機能（ブラッシングが強すぎるときにお知らせする機能）

#### しっかりキレイに

- 音波水流


# 特長

## 音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

## 歯と歯ぐきにやさしい

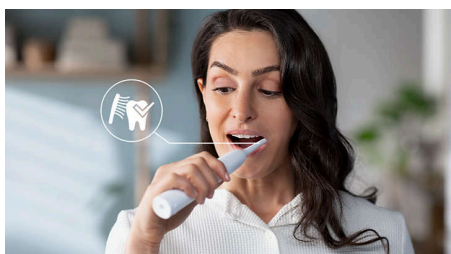

過圧防止センサーが、ブラシにかけられた圧力が強いと感知した場合は、歯ブラシの振動を自動的に抑えます。パルス音がしたら、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

## スマートタイマー機能とカドペーサー機能



カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。

## スリムで持ちやすいデザイン\*1




持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン\*1 \*1 既存のイージークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

## ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。

## イージースタート機能

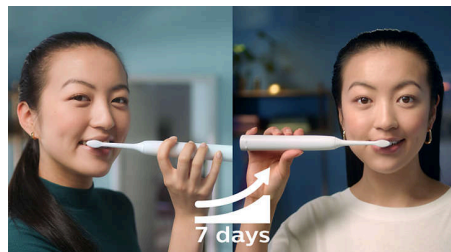

フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめてから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

## USB充電式



DC5V (USB Type A) 電源に対応。（電源アダプタは付属されていません）

## 3100 series

ソニックエアー 3100

HX3671/23

# 仕様

### 電源

対応電圧: DC5V (USB Type A)

### 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 14 日間\*\*\*\*\*

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

### デザインと仕上げ

色: ホワイト

### サービス

本体保証: 2年間保証

### 使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: スリムなデザイン

### 内容・付属品

ハンドル: 3100 シリーズ 1 本

充電器: 1

ブラシヘッド: クリーンプラスブラシヘッド 1本

### 洗浄性能

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

過圧防止センサー機能: ハンドルが振動してお知らせ

### モード

クリーン: 歯をキレイに

### スマートセンサーテクノロジー

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。  
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



\* より健康な歯と歯ぐきのための手磨きとの比較  
\* 効果には個人差があります  
\* \* 社内資料  
\* \*\*\*\*\* スタンダードモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-07-24  
バージョン: 6.6.4

EAN: 87 10103 98560 0

[www.philips.com](http://www.philips.com)