

PHILIPS

sonicare



Sonisk eltandborste

ProtectiveClean 6100

Inbyggd trycksensor

3 lägen, 3 intensitetsnivåer

Två BrushSync-funktioner

Resefodral



HX6877/34

Vitare tänder. Fint ska det vara.

Bleker tänder på bara en vecka.

Känn skillnaden av en skonsam rengöring med vår trycksensor medan du får vitare tänder på en vecka.

Ger bevisat bättre munhälsa

- Säker och skonsam för känsliga områden, ortodonti och tandbehandlingar
- Vitare tänder på bara en vecka

Utformad för dig

- Uppmuntran att borsta noggrant
- Gör resan enklare för dig

Innovativ teknik


- Meddelar dig om du trycker för hårt
- Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena
- Philips Sonicares avancerade soniska teknik
- Ansluter det smarta borsthandtaget och smarta borsthuvuden

Få bästa möjliga resultat med tandborstningen

- Tre lägen, tre intensitetsinställningar
- Borsthuvudena väljer det optimala läget och den optimala intensiteten


Funktioner

Naturligt vitare tänder

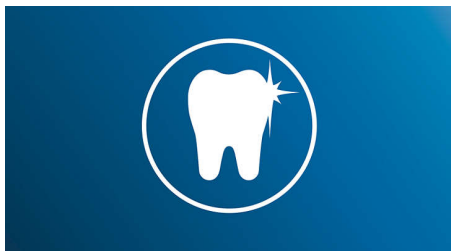

Klicka på W2 Optimal White-borsthuvudet för att ta bort ytfläckar och få ett vitare leende. Det är kliniskt bevisat att de tätt sittande fläckborttagningsborsten i mitten gör tänderna vitare på bara en vecka.

Borsta på ditt sätt

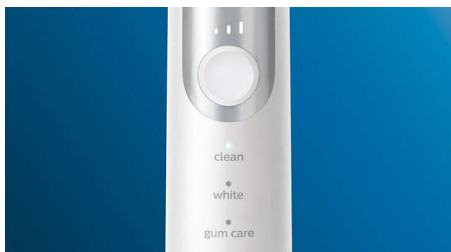

Med den här tandborsten kan du anpassa din borstning med ett urval av tre lägen och tre intensitetsnivåer. Rengöringsläget är standard för överlägsen rengöring. Vitt är det perfekta läget för borttagning av ytfläckar. Och med Gum Care-läget får du en extra minuts borstning med minskad effekt så att du varsamt kan massera tandköttet. Med tre intensitetsnivåer kan du växla mellan "högre" och "lägre" för att justera intensiteten från vänster till höger.

Säkert och skonsamt



Du får en säker borstningsupplevelse: vår sonic-teknik är lämplig för användning med tandställning, fyllningar, kronor, och fasader, och hjälper till att förhindra hål och förbättra munhälsan.

Philips Sonicare-teknik



Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

Övervaka borsttrycket



Om du borstar för hårt kan tänder och tandkött skadas. För att förhindra detta avger Philips Sonicare ProtectiveClean ett försiktigt pulserande ljud för att påminna dig om att lätta på trycket.

BrushSync-teknik



En mikroprocessor-aktiverad teknik som identifierar och synkroniserar det smarta borsthuvudet med det smarta handtaget. Smart handtag och smart borsthuvud är en kraftfull kombination som aktiverar Smart mode-parning och påminnelser av smart byte.

Läges- och intensitetsihoppning



Så vilket läge och vilken intensitet ska du använda? BrushSync-lägesihoppningen talar om för ditt smarta handtag vilket smart borsthuvud du använder. Om du exempelvis klickar på ett borsthuvud för tandköttsvård väljer tandborsten optimalt läge och optimal intensitet för ditt tandkött. Allt du behöver göra är att trycka på strömknappen.

Funktioner

Påminnelse om att byta BrushSync



Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men med vår BrushSync-teknik ser du hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. När det är dags att byta ut det lyser handtaget och en kort ljudsignal meddelar dig. På så sätt kan du vara säker på att borsthuvudet gör ett bra jobb.

Praktiska timers



Behöver du en eltandborste med en timer? Vår QuadPacer informerar dig när du har lagt ned precis rätt mängd tid på rengöring av alla tänder i munnen medan vår Smartimer informerar om när du har borstat i de rekommenderade två minuterna.

Praktiskt resefodral och laddare



Med vårt förstklassiga resefodral kan du förvara din tandborste på ett hygieniskt sätt, och med vår kompakta laddningsenhet kan du hålla igång dina enheter när du är ute och reser. Du får två veckors regelbunden användning från en laddning, men laddaren är perfekt för långa resor.

Specifikationer

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): Upp till 2 veckor

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Vit/silver

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Borstningstid: Upp till 2 veckor

Medföljande tillbehör

Laddare: 1

Borsthuvuden: 2 W2 optimal white

Handtag: 2 ProtectiveClean

Resefodral: 2

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor, Bidrar till att minska risken för hål

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att varna användaren

Lägen

Tre intensitetsnivåer: Låg, Medium, Hög

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Tandköttsvård: Masserar tandköttet varsamt

Vit: Tar bort missfärgningar

BrushSync-lägesihoppning

C2 Optimal plackkontroll: Paras ihop med Clean-läge

G2 Premium Gum Care: Paras ihop med Gum Care-läget

W2 Optimal White: Paras ihop med vitläget

Smart-sensorteknologi

Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt

BrushSync-teknik: Ansluter smart handtag och, smart borsthuvud

