

PHILIPS

sonicare



Nabíjateľná sonická
zubná kefka

6100

Odstraňuje až 20x viac povlaku

2 režimy, 3 stupne intenzity

Viditeľné upozornenie na tlak

Výdrž batérie až 21 dní



HX7408/02

Šetrné čistenie aj pre citlivé zuby a d'asná

Odstraňuje až 20x viac povlaku*

Kefka Philips Sonicare 6100 je vybavená technológiou Sonicare novej generácie, špeciálnym režimom Sensitive, 3 kefkovými nastavcami na odstraňovanie zubného povlaku, na citlivé zuby a bielenie a nízku intenzitu. Okrem toho je k dispozícii snímač tlaku pre prípad, že si pacienti čistia zuby príliš intenzívne.

Jemné, dokonalé čistenie

- Kompletná starostlivosť pre zdravšie zuby

Čistenie bez námahy

- Ochrana ďasien pomocou viditeľného snímača tlaku
- Prispôbte si čistenie pomocou 6 nastavení čistenia
- Vždy viete, kedy je čas na nový kefkový nastavtec

Dokonalé čistenie

- Technológia Sonicare novej generácie

Navrhnuté pre váš životný štýl

- Zvárané laserom – pevné a odolné
- Čistíte si zuby lepšie s funkciami SmarTimer a BrushPacer
- Až 3 týždne čistenia na jedno plné nabitie

Hlavné prvky

Kefkový nadstavec A3 All-in-One + viac



Kefkový nadstavec A3 Premium All-in-One je navrhnutý s ohľadom na pacientov. S kefkovým nadstavcom A3 môžu pacienti dosiahnuť až 20-krát väčšie odstránenie povlaku*, až 15-krát zdravšie ďasná** a odstrániť až o 100 % viac škvrn***. Súčasť balenia: Vďaka novej kefkovej hlavičci S2 Sensitive vyrobenej z najjemnejších vlákien Sonicare môžu pacienti dosiahnuť jemné čistenie, ktoré odstráni až 10-krát viac povlaku v ťažko dostupných oblastiach*.

Technológia Sonicare novej generácie



Vychutnajte si príjemný zážitok z čistenia a novú úroveň starostlivosti o ústnu dutinu vďaka technológii Sonicare novej generácie. Inovatívny magnetický systém zubnej kefy počas čistenia upravuje výkon kefy počas každého čistenia a poskytuje optimálny výkon 62 000 pohybov štetín za minútu, a to aj v ťažko dostupných oblastiach. Dynamické fluidné pôsobenie


medzitým podporuje štetiny pri čistení povlaku, čím vám pomáha dosiahnuť úplné vyčistenie pri každom čistení.

6 nastavení čistenia



Kefka Philips Sonicare 6100 je určená pre citlivé zuby a ďasná a umožňuje pacientom vybrať si z dvoch režimov čistenia. Režim Sensitive poskytuje jemné a dôkladné čistenie, zatiaľ čo režim Clean sa zameriava na odstraňovanie zubného povlaku pre dokonalé vyčistenie. Pri prispôbenom čistení môžu pacienti kombinovať ľubovoľný režim s jedným z troch stupňov intenzity, od vysokého po nízky, a zaistiť čistenie zubov, ktoré je presne na mieru.

Snímač tlaku so svetelným krúžkom

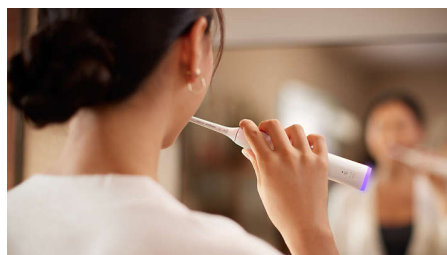

Pacienti si možno nevšimnú, že si zuby čistia príliš tvrdo, ale táto zubná kefka si to všimne. Inteligentný optický snímač presne rozpozná nadmerný tlak pri čistení zubov, potom začne

blikať fialovou farbou a zároveň zníži vibrácie. Pacienti budú vždy vedieť, kedy upraviť čistenie zubov, a ich ďasná zostanú chránené.


Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync



Pravidelná výmena kefkového nadstavca je dôležitou súčasťou udržiavania dobrého zdravia ústnej dutiny. S technológiou BrushSync je pre pacientov jednoduché udržať kefkový nadstavec v čo najlepšom stave. Vďaka sledovaniu frekvencie používania a intenzity čistenia inovatívna technológia pacientom následne pripomenie, kedy je čas na nový kefkový nadstavec.


Hlavné prvky

2-minútový časovač a časovač čistenia

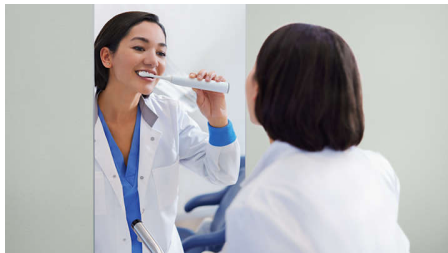

Dve minúty sú všetko, čo pacienti potrebujú na kompletne vyčistenie, takže náš časovač SmarTimer informuje pacientov o tom, že čas vypršal. Na rovnomerné čistenie celej ústnej dutiny rozdeľuje BrushPacer čistenie na segmenty, pričom mierna prestávka vo vibráciách je znamením, že je potrebné pokračovať. To podporuje pacientov pri dosahovaní rovnomerného čistenia pri každom čistení zubov.

Navrhnuté pre dlhodobú životnosť

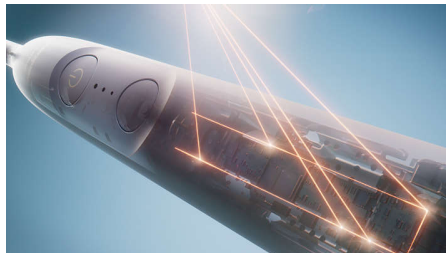

Zubné kefky Philips Sonicare sme zvnútra prepracovali tak, aby boli pevné, ľahké a mali dlhú životnosť. Vďaka pokročilému procesu zvárania laserom sú naše zubné kefky navrhnuté tak, aby ich pacienti mohli používať dlhé roky.

Až 3 týždne medzi jednotlivými nabitiami



Táto zubná kefka používa vysoko výkonnú batériu, ktorá je navrhnutá tak, aby zlepšila váš zážitok z čistenia zubov. Na jedno nabitie si pacient môže užívať až tri týždne pravidelného čistenia zubov, kým ju bude musieť dobiť.

Technické údaje

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 nabíjateľná zubná kefka 6100

Kefkové nástavce: 1 A3 Premium All-in-One, 1 S2

Sensitive, 1 kefkový nadstavce W2 Optimal White

Nabíjacia jednotka: 1

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Sensitive: Na citlivé zuby a ďasná

Intenzity

Vysoká: Na zlepšenie účinkov čistenia

Stredná: Na každodenné čistenie

Nízka: Na citlivé zuby a ďasná

Výsledky čistenia

Odstraňovanie povlaku: Až 20-krát účinnejšia*

Gum Health: Až 15-krát zdravšie ďasná***

Frekvencia: 62 000 pohybov kešky za minútu

Bielenie: Až o 100 % menej škvrín**

Jednoduché použitie

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Časovač: SmartTimer a BrushPacer na kompletné a dôkladné čistenie zubov

Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona ukazuje stav batérie

Nabíjanie cez USB-A: Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky

Technológia inteligentných senzorov

Spätná väzba na použitý tlak: Svetelný krúžok svieti fialovou farbou, Znížené vibrácie a pulzujúci zvuk

Pripomenutie výmeny: Technológia BrushSync vás upozorní, kedy je potrebné vymeniť kefkový nadstavce

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): 21 dní

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Príkon

Napätie: 100 – 240 V

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela

