

PHILIPS

AVENT



Elektriline
topeltrinnapump

Hands-free



SCF532/11

Vabastage oma käed. Vabastage oma aega.

Imiteerib teie beebi joomisrütmi

Philips Avent Hands-free elektriline topeltrinnapump on loodud tõhusaks* ja mugavaks pumpamiseks. See jäljendab teie beebi imemisrütmi ning selle võimsus, õrnus ja kergus teeb sellest teie jaoks ideaalse seadme, mis jätab käed vabaks.

Füüsiline vabadus pumpamise ajal

- Tänu ülikergetele kogumistopsidele saate vabalt liikuda
- Mugavalt kaasaskantav, et tagada maksimaalne liikumisvabadus

Imiteerib beebi joomisrütmi

- Tõhus pumpamine*, mis jäljendab teie beebi loomulikku imemisrütmi
- Haiglale sarnase võimsusega vaikne pumpamine

Lihtne kasutada, puhastada ja kokku panna

- Läbipaistvate kogumistopsidega saab piima voolu jälgida
- Vähemate osade tõttu on seda lihtne puhastada ja kokku panna
- Isikupärastage oma pumpamist

Mugav ja sobiv

- Silikoonkaitsmed vormuvad õrnalt teie rindade järgi
- Rinnakaitse ja siseotsakute valik igale emale

Esiletõstetud tooted

Imiteerib beebi joomisrütmi



Beebid teavad, kuidas kõige paremini juua! Seetõttu jäljendab meie käed-vabad elektriline rinnapump beebide loomuliku joomisrütmi – nii et saate tõhusa* pumpamise ja optimaalse piimakoguse jaoks leida oma rütmi. Philips Avent käed-vabad rinnapump pumpab kuni 85 korda minutis ja on 2 korda kiirem kui enamik teisi rinnapumpasid**.

Haiglale sarnase võimsusega mootor




Peaaegu hääletu mootoriüksus tagab haiglale sarnase võimsuse, mida oodatakse tavaliselt rinnapumbalt, kuid seda kompaktse ja kaasaskantava seadmena. Akuga ja juhtmeta mootoriüksuse abil saate pumbata võimsalt ja diskreetselt kõikjal.

Unikaalsed SkinSense'i kaitsmed



Meie ainulaadsed SkinSense'i silikoonist rinnakaitsmed on loodud ülima mugavuse tagamiseks, sest vormuvad teie keha loomuliku soojuse mõjul pehmelt ümber teie rindade. Täieliku meelerahu tagamiseks on rinnakaitsmed valmistatud toiduohutust silikoonist.

Läbipaistev kollektsioon

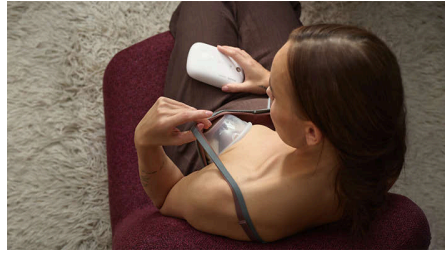

Läbipaistvate kogumistopsidega on sisemus hästi näha. Need aitavad rinnanibusid õigesti paika seada, et tagada parim piimavool, ja näha väljapumbatava rinnapiima kogust. Enesekindlaks pumpamiseks esimesest tilgast kuni lõpuni.

Ülikerge kogumistops



Üks kogumistops kaalub tühjana vaid veidi üle 100 grammi – kuni kolm korda kergem kui täielikult kantav rinnapump. Topsid istuvad mugavalt rinnahoidja sees ja pole peaaegu märgatagi, et need seal on.

Kandke seda omal moel




Meie rinnapumbaga on kaasas punutud kandepael ja rõivaklamber, et seada mootoriosa kandmisel pael risti üle keha või kinnitada see võõrihma külge. Tänu vabadusele kanda seda mugavalt, saate püsida omas rütmis, teades, et kontroll on kindlalt teie kätes. Kasutage voolikut ja paelaregulaatorit, et seade enda jaoks täpselt sobivaks timmida.

Isikupärane pumpamine




Võtke igast pumpamisest maksimum 8 taset piima väljavoolu stimuleerimiseks ja 16 taset piima pumpamiseks. Saate pumpamise ajal seadet peenhäälestada, teile kõige sobivam seadistus salvestatakse automaatselt mälusse, et rinnapump oleks alati töövalmis.

Kerge puhastada ja kokku panna

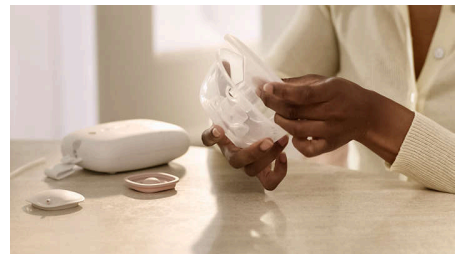

Kujundasime rinnapumba ja lisatarvikud nii, et nende käsitlemine oleks võimalikult lihtne. Ainult mõne ühendusdetailiga on igat kogumistopsi imelihtne lahti võtta, puhastada (käsitsi või nõudepesumasinas) ja uuesti kokku panna.

Leidke paras sobivus

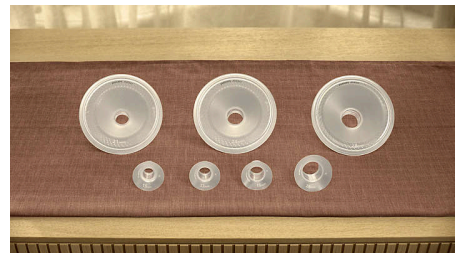

Aitame igal emal end kõige paremini tunda ja õige sobivus on selle oluline osa. Meie rinnakaitsmete ja nende siseotsakute suuruste valikust leiab endale sobiva 99% emadest. Neid saab osta eraldi, et saaksite end pumbates ülimugavalt tunda.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Allikas: Laetav aku / USB-C (adapter ei kuulu komplekti)

Materjal

Tops, esikate, rinnakaitsme kate: Polüpropüleen

Rinnakaitse, membraan, klapp, siseotsak: Vedel silikoon

Silikoonvoolik: Silikoonist

Mis on kaasas

USB-C kaabel: 1 tk

Kandepael: 1 tk

Toruliitmik: 1 tk

Laetav mootor (eemaldatava klambriga): 1 tk

Kogumistops (kokkupandud): 2 tk

Silikoonvoolikud: 2 tk

Rinnakaitsme (tolmu) kate: 2 tk

Rinnakaitse (21 mm, 24 mm): 2 tk

Luti suuruse määramise kaart: 1 tk

Siseotsak 19 mm: 2 tk

Kergesti kasutatav

Rinnapumba kasutamine: Lihtne kasutada, puhastada ja kokku panna

Funktsioonid

Paindlikkus liikumisel: Mugav pumpamine

Isikupärastamise seaded: 16 taset pumpamisrežiimis, 8 taset stimulatsioonirežiimis

Mootor: Aku / USB-C, Aku täislaadimine võtab aega kuni 1,5 tundi ja kestab umbes 5 pumpamise korda

Rinnakaitsme ja siseotsaku spetsifikatsioonid: Saadaval mitu suurust parima sobivuse tagamiseks

