

PHILIPS

AVENT



Elektriline üksik
rinnapump

Hands-free



SCF531/11

Vabastage oma käed. Vabastage oma aega.

Imiteerib teie beebi joomisrütmi

Elektriline käed vabaks jättev üksik rinnapump Philips Avent on tõhus* ja mugav lahendus. See jäljendab teie beebi söömisrütmi ning on teie võimas, õrn ja kerge kaaslane ja kingib teile vabaduse.

Füüsiline vabadus pumpamise ajal

- Tänu ülikergele kogumistopsile saate vabalt liikuda
- Mugavalt kaasaskantav, et tagada maksimaalne liikumisvabadus

Imiteerib beebi joomisrütmi

- Tõhus pumpamine*, mis jäljendab teie beebi loomulikku imemisrütmi
- Haiglale sarnase võimsusega vaikne pumpamine

Lihtne kasutada, puhastada ja kokku panna

- Läbipaistva kogumistopsiga saab piima voolu jälgida
- Isikupärastage oma kasutust 24 režiimi abil
- Vähemate osade tõttu on seda lihtne puhastada ja kokku panna

Mugav ja sobiv

- Rinnakaitse ja siseotsakute valik igale emale
- Silikoonkaitse vormub õrnalt teie rinna järgi

Esiletõstetud tooted

Imiteerib beebi joomisrütmi



Beebid teavad, kuidas kõige paremini juua! Seetõttu jäljendab meie käed-vabad elektriline rinnapump beebide loomuliku joomisrütmi – nii et saate tõhusa* pumpamise ja optimaalse piimakoguse jaoks leida oma rütmi. Philips Avent käed-vabad rinnapump pumpab kuni 85 korda minutis ja on 2 korda kiirem kui enamik teisi rinnapumpasid**.

Haiglale sarnase võimsusega mootor



Peaaegu hääletu mootoriüksus tagab haiglale sarnase võimsuse, mida oodatakse tavaliselt rinnapumbalt, kuid seda kompaktse ja kaasaskantava seadmena. Akuga ja juhtmeta mootoriüksuse abil saate pumbata võimsalt ja diskreetselt kõikjal.

Unikaalsed SkinSense'i kaitsmed



Meie ainulaadne SkinSense'i silikoonist rinnakaitse on loodud ülima mugavuse tagamiseks, sest vormub teie keha loomuliku soojuse mõjul pehmelt ümber teie rinna. Täieliku meelerahu tagamiseks on rinnakaitse valmistatud toiduohutust silikoonist.

Läbipaistev kollektsioon



Läbipaistva kogumistopsiga on sisemus hästi näha. See aitab rinnanibu õigesti paika seada, et tagada parim piimavool, ja näha väljapumbatava rinnapiima kogust. Enesekindlaks pumpamiseks esimesest tilgast kuni lõpuni.

Ülikerge kogumistops




Meie kogumistops kaalub tühjana vaid veidi üle 100 grammi – kuni kolm korda kergem kui täielikult kantav rinnapump. Tops istub mugavalt rinnahoidja sees ja pole peaaegu märgatagi, et see seal on.

Kandke seda omal moel



Meie rinnapumbaga on kaasas punutud kandepael ja rõivaklamber, et seada mootoriosa kandmisel pael risti üle keha või kinnitada see võõrihma külge. Tänu vabadusele kanda seda mugavalt, saate püsida omas rütmis, teades, et kontroll on kindlalt teie kätes. Kasutage voolikut ja paelaregulaatorit, et seade enda jaoks täpselt sobivaks timmida.

Isikupärane pumpamine

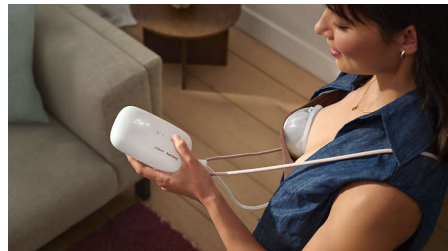


Võtke igast kasutuskorras maksimum 8 piimavoolu stimuleerimise režiimi ja 16 piima pumpamisrežiimi abil. Pumpamise ajal saate neid vastavalt oma soovile reguleerida ja teie ideaalne seadistus salvestatakse automaatselt seadme mälu, nii on rinnapump alati töövalmis.

Kerge puhastada ja kokku panna



Kujundasime rinnapumba ja lisatarvikud nii, et nende käsitlemine oleks võimalikult lihtne. Ainult mõne ühendusdetailiga on igat kogumistopsi imelihtne lahti võtta, puhastada (käsitsi või nõudepesumasinas) ja uuesti kokku panna.

Leidke paras sobivus

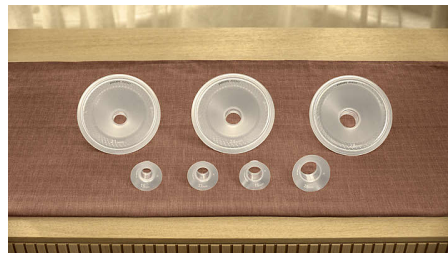

Aitame igal emal end kõige paremini tunda ja õige sobivus on selle oluline osa. Meie rinnakaitsete ja nende siseotsakute suuruste valikust leiab endale sobiva 99% emadest. Neid saab osta eraldi, et saaksite end pumbates ülimugavalt tunda.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Allikas: Laetav aku / USB-C (adapter ei kuulu komplekti)

Materjal

Tops, esikate, rinnakaitsme kate: Polüpropüleen

Rinnakaitse, membraan, klapp, siseotsak: Vedel silikoon

Silikoonvoolik: Silikoonist

Mis on kaasas

USB-C kaabel: 1 tk

Kandepael: 1 tk

Laetav mootor (eemaldatava klambriga): 1 tk

Kogumistops (kokkupandud): 1 tk

Silikoonvoolikud: 1 tk

Rinnakaitsme (tolmu) kate: 1 tk

Rinnakaitse (21 mm, 24 mm): 1 tk

Luti suuruse määramise kaart: 1 tk

Siseotsak 19 mm: 1 tk

Kergesti kasutatav

Rinnapumba kasutamine: Lihtne kasutada, puhastada ja kokku panna

Funktsioonid

Paindlikkus liikumisel: Mugav pumpamine

Isikupärastamise seaded: 16 taset pumpamisrežiimis, 8 taset stimulatsioonirežiimis

Mootor: Aku / USB-C, Aku täislaadimine võtab aega kuni 1,5 tundi ja kestab umbes 5 pumpamise korda

Rinnakaitsme ja siseotsaku spetsifikatsioonid: Saadaval mitu suurust parima sobivuse tagamiseks

